

Praxis-Integration Quick Start Guide

Verknüpfen Sie die AcceleDent App über Bluetooth® mit Ihrem AcceleDent Optima™, um die Behandlung Ihrer Patienten nachzuverfolgen und die klinischen Ergebnisse zu optimieren.

1 Download



Installieren Sie die kostenlose AcceleDent App:

- **Android™ Gerät:** Suchen Sie im Android Markt oder Google Play™ Store nach der AcceleDent App.
- **Apple® Gerät:** Suchen Sie im Apple App Store® nach der AcceleDent App.

2 Registrierung

Ein AcceleDent-App-Konto für Ihre Praxis wurde bereits erstellt.


- Sie erhalten eine E-Mail von **customerservice@orthoaccel.com** in Ihr Postfach. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam- & Junk-Ordner.
- **Bitte bestätigen** Sie Ihr neues MyAcceleDent-Konto, indem Sie auf den Link klicken.
- Sobald Ihre Email bestätigt ist, bekommen Sie einen Link zugesendet über den Sie zur Passworteinrichtung gelangen. Geben Sie das Passwort unter den folgenden Bedingungen ein und bestätigen Sie es: 6 Buchstaben, 1 Nummer, 1 Zeichen.
- Gehen Sie zurück auf MyAcceleDent.com. **Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse** als User ID ein und dann das **Passwort**. Bitte nutzen Sie dieselbe Email-Adresse auf die Sie auch die Bestätigungsmail erhalten haben. Sie haben nun den Zugang zu Ihrem Praxis-Konto eingerichtet.



Home-Screen

Auf dem Home-Screen ist für Ihre Praxis die **Nutzungsbibliothek** mit allen **aktiven Patienten** sichtbar. Sie können Patienten suchen oder nach Namen und Ranking sortieren.

- Das Ranking zeigt die gesamte Compliance eines einzelnen Patienten. Grün bedeutet „über 80% Compliance“, grau bedeutet „60-80% Compliance“ und rot bedeutet „unter 60% Compliance“.
- **Klicken** Sie auf den **Namen eines Patienten**, um dessen Übersichtsseite zu sehen. Der Überblick über die Daten aller Ihrer AcceleDent-Patienten erlaubt Ihnen ein proaktives Case-Management.

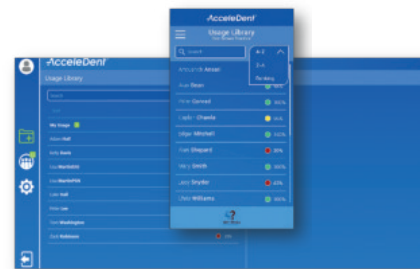

Das Menü

Über die drei horizontalen Balken gelangen Sie in der App in das Menü. In dem Webportal ist das Menü immer auf der linken Seite sichtbar.


- Tippen Sie auf Menü, um durch die verschiedenen Menübereiche zu navigieren.
- Eine **grüne Zahl** neben dem Menü-Symbol zeigt Ihnen **Mitteilungen** an.



Die direkte Verbindung zu Ihren Patienten

Es gibt zwei Möglichkeiten Patienten hinzuzufügen:

1. Die Praxis kann über die mobile App den **QR-Code auf der Verpackung scannen** und somit das Gerät mit der Praxis verbinden.
 - Gehen Sie auf **Community** oder **Nutzungsverlauf**.
 - Klicken Sie auf das **(+) Symbol** oben rechts in der Ecke und **wählen QR-Code** aus.
 - **Finden Sie den QR-Code** auf der Verpackung des Gerätes und **scannen** Sie diesen. Sie erhalten dann eine Notiz, dass das Gerät erfolgreich gescannt wurde. Die Geräte werden im System nicht angezeigt.
 - Sobald ein Patient sich registriert hat und sein Gerät verbindet, wird die Praxis automatisch verbunden.

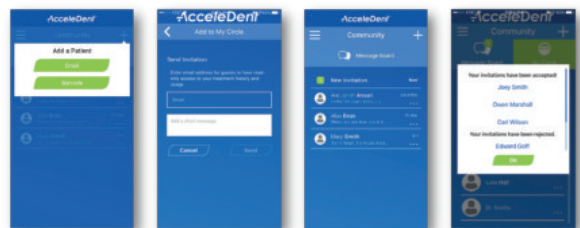

Anmerkung: Wenn der Patient noch nicht registriert ist, wird die Einladung im System gespeichert bis der Patient seinen Account eingerichtet hat.

2. Die Praxis kann sich mit dem Patienten über die App oder über das Webportal mit einem E-Mail Link verbinden.
 - Gehen Sie auf **Community** oder **Nutzungsverlauf**.
 - Klicken Sie auf das **(+) Symbol** oben rechts in der Ecke, und **tippen dann auf E-Mail**.
 - Geben Sie die E-Mail-Adresse des Patienten an und tippen Sie auf **senden**.
 - Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Patient Ihre Praxis zu seiner Community hinzufügt.

Patienten-Information


Auf der Übersichtsseite finden Sie nicht nur die Nutzungsinformationen, sondern auch grundlegende Patienten-Informationen.

- Das **Informationssymbol (i)** zeigt Ihnen grundlegende Informationen und bietet Ihnen die Möglichkeit **Go to Messages** zu senden oder den **Patienten zu archivieren**.
- Auch auf der Community-Seite wird Ihnen das Informationssymbol (i) grundlegende Informationen zeigen, sowie einen Link über den Sie zurück zur **Patienten-Nutzungsübersicht** gelangen.




Patientenfortschritt verfolgen

- Sobald Sie auf einen **individuellen Patienten klicken**, sehen Sie als erstes dessen Gesamtnutzung innerhalb der letzten 30 Tage.
- Die **globale Position** ist die individuelle Nutzung eines Patienten verglichen mit allen anderen AcceleDent Patienten weltweit. Je höher die Zahl, desto besser das Ranking.
- Scrollen Sie herunter und sehen Sie weitere Nutzungsdetails: Tage mit korrekter Nutzung, zu viel Nutzung und verpassten Sitzungen bezogen auf die letzten 30 Tage.
- Grün bedeutet eine „20-minütige Nutzung“, orange bedeutet „zu viel Nutzung“ und rot bedeutet „verpasste Sitzung“.
- Das Dashboard wird Ihnen auch anzeigen, zu welcher Tageszeit der Patient AcceleDent angewendet hat: hellblau bedeutet „morgens“, blau bedeutet „tagsüber“ und dunkelblau bedeutet „abends“.

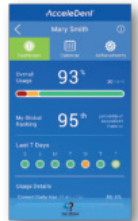

Patienten-Kalender


- Wenn Sie auf **Kalender** tippen, wird Ihnen der komplette Monat angezeigt.
- Wenn Sie einen bestimmten Tag auswählen, bekommen Sie weitere Informationen darüber zu welcher Tageszeit der Patient AcceleDent genutzt hat.

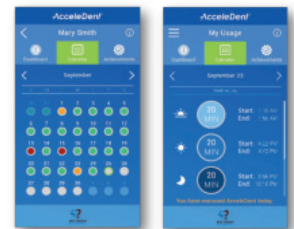

Community für klinische Fragen

Die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme mit Ihren AcceleDent Patienten hilft bei der Motivation. Sie können Erinnerungen in Bezug auf die Nutzung, einen Folgetermin oder andere wichtige Benachrichtigungen versenden.

- Nutzen Sie die **Community**, um Nachrichten an Patienten zu versenden, indem Sie auf den **Namen des Patienten tippen** und eine Nachricht eingeben.
- Zögern Sie nicht Patienten zu gratulieren, wenn Sie AcceleDent regelmäßig und gut benutzen.
- Motivieren und erinnern Sie Patienten, die AcceleDent nicht so gut nutzen über eine Nachricht in der App.
- Patienten können direkt mit der Praxis kommunizieren und fühlen sich auch zwischen den Terminen mehr mit dem Behandlungsteam verbunden.

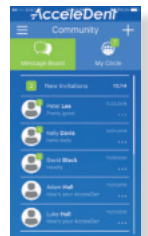

Support

Im Support-Menü finden Sie weitere brauchbare Informationen über AcceleDent, Ihr **Konto**, wie man **Benachrichtigungen** einstellt und brauchbare **Videos und Anleitungen**. Sie können ebenfalls verschiedene **Zeitzonen** und **Sprachen** auswählen.

