

Guía de Inicio Rápida Quick Start Guide

La aplicación de AcceleDent funciona conectando tu dispositivo AcceleDent Optima™ vía Bluetooth®. El emparejamiento desbloquea las funciones para monitorizar los tratamientos de los pacientes y optimiza los resultados clínicos.

1 Descarga

Por favor, instale la APP gratuita de AcceleDent:



- **Dispositivo Android™:** Busque en Android Market o Google Play™ Store la aplicación AcceleDent.
- **Dispositivo Apple®:** Busque en Apple App Store® la aplicación AcceleDent.

2 Registro

Una cuenta AcceleDent ha sido ya creada para su consulta.

- Recibirá un email enviado desde **customerservice@orthoaccel.com** en su bandeja de entrada. Por favor, verifique su carpeta de correo no deseado.
- Por favor, **confirme** su Nueva MyAcceleDent Account usando el link.
- Una vez que su email haya sido confirmado, aparecerá un link que le llevará a una nueva pantalla para establecer su contraseña. Reset el contenido del password con los siguientes requerimientos para aplicar: 6 letras, 1 número, 1 carácter
- Vaya atrás a MyAcceleDent.com. **Escriba el email** de Usuario y después el **Password**. Por favor, utilice la dirección de correo que se le ha enviado. Ahora ya tiene configurado el acceso a la cuenta de su consulta.



Cómo utilizar

La pantalla de inicio para consultas será **Usage Library** con todos los **Active Patients** visibles. Los pacientes se encuentran clasificados por nombre y ranking.


- Ranking es el cumplimiento del tratamiento. Verde indica "superior 80% cumplimiento", naranja indica "60-80% cumplimiento" y rojo indica "inferior 60% cumplimiento".
- **Clique en el nombre del paciente** para ver su historial. Se trata de un vistazo sobre el uso de los pacientes AcceleDent que permite proactivamente dirigirles.



Menú

El icono con las tres rayas horizontales es el Menú de la aplicación. El Menú siempre será visible en el portal web en el margen izquierdo.


- Entre en el Menú para navegar a través de las pantallas.
- Un **número verde** al lado del icono Menú **indica notificaciones**.

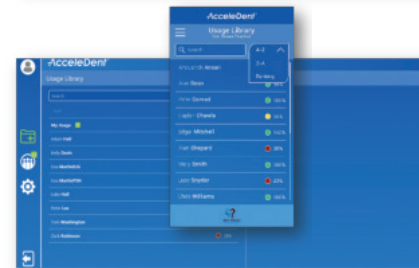

Un Enlace Directo a sus Pacientes

Existen dos maneras de añadir pacientes:

1. Se puede escanear directamente el **código QR de la caja** en la consulta, para vincular directamente el dispositivo a la cuenta de la consulta.
- Vaya a la **Comunidad** o **Uso de la Librería**.
- **Haga click** en el **icono (+)** en la esquina superior derecha y **elija código QR**.
- **Busque el Código QR** en la etiqueta del dispositivo y **escanéelo**. Recibirá una notificación de que el escaneo se ha realizado correctamente, pero no verá los dispositivos en la cuenta.
- Cuando el paciente se registre en su APP y vincule su dispositivo, automáticamente estará conectado a la cuenta de la consulta.

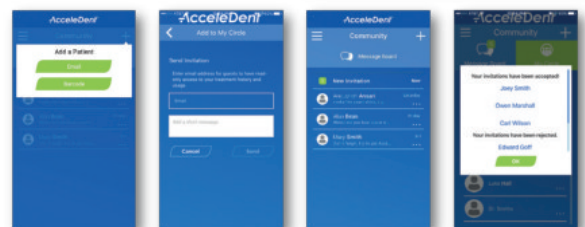

Nota: si el paciente no se ha registrado aún, la invitación permanecerá en el sistema hasta que el paciente configure su cuenta.

2. La consulta puede conectar con el paciente a través de la aplicación o del portal web mediante un Email de conexión.
- Vaya a la **Comunidad** o **Uso de la Librería**.
- **Clique en el icono (+)** en la esquina derecha, y **entre en Email**.
- Rellene con el email del paciente y apriete en send.
- Será notificado cuando sus pacientes le agregen.

Información del paciente


Puede obtener información del paciente de diversas maneras.

- El **icono (i)** mostrará la información básica, así como también un enlace a **Go to Messages** o la capacidad **Archive Patient**.
- En la pantalla Community, el icono (i) volverá a mostrar la información básica y el enlace **Patient's Usage History**.



Registro del Progreso del Paciente

- Una vez selecciona un paciente individual podrá visualizar el uso del dispositivo durante los 30 últimos días.
- El **Global Ranking** es el uso individual del paciente comparado con los pacientes AcceleDent a nivel mundial.
- Más abajo, podrá ver más detalles: días de uso correcto, sobreuso y sesiones no realizadas durante los 30 últimos días.
- Verde indica bien, naranja indica sobreuso y rojo indica sesiones no realizadas.
- También mostrará a qué hora del día el paciente hace uso de AcceleDent: azul claro indica mañana, azul indica día y azul oscuro indica noche.

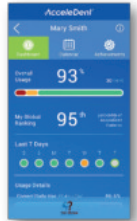

Calendario de Progreso del Paciente


- Si selecciona **Calendar** se mostrará el mes entero.
- Cuando selecciona un día concreto aparecerá más información acerca de la hora del día el paciente ha realizado la sesión.



Comunidad para Cuestiones Clínicas

La mensajería directa con sus pacientes puede utilizarla para estimularles, enviarles recordatorios de tratamiento y para cualquier otra notificación que estime oportuna.

- Utilice **Community** para enviar mensajes a pacientes clicando encima de cada nombre del paciente.
- Para pacientes que están haciendo un buen tratamiento, no dude en felicitarle.
- Para pacientes que no recuerdan el uso de AcceleDent, anímelos a seguir el tratamiento mediante un mensaje a través de la aplicación.
- Los pacientes pueden también responderle y sentirse más "conectados" con el equipo que le está tratando, durante el tiempo entre visitas.

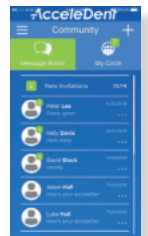

Support

En el menú Support puede encontrar más información útil sobre su **Account ID**, AcceleDent, cómo establecer **Notificaciones** así como también **Videos e Instrucciones**. También puede modificar la **hora e idiomas**.

